



Felfújható üllőgyűrű felfekvés ellen 40 cm huzattal SD41240  
Felfújható üllőgyűrű felfekvés ellen 45 cm huzattal SD41245  
Felfújható üllőgyűrű felfekvés ellen 40 cm SD41440  
Felfújható üllőgyűrű felfekvés ellen 45 cm SD41445 használati utasítás



- ▶ Felfújható léggűrű párna
- ▶ Gumi léggűrű csavaros szeleppel
- ▶ különböző méretek
- ▶ Felfújható léggűrű párnakészlet
- ▶ Gumi léggűrű csavaros szeleppel
- ▶ Készlet fedéllel és szivattyúval
- ▶ különböző méretek

**Rendeltetészerű használat:** A léggpárna egy orvosi eszköz, és rövid távú használatra készült nyomáscsökkentés és fiziológiailag javított pozicionálás lehetősége/ ülő helyzet akut helyzetekben.

**Jelzés:** Alkalmazás akut helyzetekben, mint például gátmetszés/szakadás, prosztatata, farkcsont, anális/aranyér vagy hólyag indikációi (műtét utáni vagy konzervatív)

**Ellenjavallat:** Latex allergia, hosszabb ideig tartó használat (ödéma veszélye), fizikai mozgásképtelenség a párna alkalmazási területén, elégtelen testi vagy szellemi képességei a segédeszköz használatához.

**Leírás:** A légpárna gumiból készült és egyedileg alakítható különböző pozícióigényekhez levegővel való feltöltéssel. A mélyedés a középső részen lehetőséget kínál az érintett területek üreges helyzetére a testet a fenti jelzések szerint. Ennek eredményeként hiányok alakulnak ki az ülés/fekvés javítható. Független pozícióváltás a felhasználónak meg kell adni, hogy enyhe változtatást tudjon végrehajtani nyomáscsökkentéssel a párna területén. A légpárna csak átmenetileg használható az ödéma kialakulásának megelőzésére.

**Első használat/karbantartás előtt:** Először olvassa el a jelen utasítást teljes kézikönyvet, és tartsa a csomagolással együtt a végéig a termék élettartamáról. Kérjük, ellenőrizze, hogy a termék sértetlen-e az első használat előtt és minden használat előtt. Sérülés vagy kopás jelei esetén, a légpárnát (több) nem szabad használni. Légpárna készlet EXKLUSIV: a mellékelt frottír huzatot az első használat előtt ki kell mosni (maximum 40 °C-ig). A termék további karbantartása az a biztonsági előírások betartása nem szükséges. A fent említettekől eltérő felhasználás nem rendeltetésszerű. SUNDO Az ebből eredő károkért a GmbH nem vállal felelősséget, a kockázatot kizárólagosan viseli a felhasználó által. Bármilyen súlyos incidens, amely ezzel kapcsolatban történik, a terméket haladéktalanul jelenteni kell a gyártónak vagy az illetékes hatóság.

**Alkalmazás:** A légpárna felfújása kézzel vagy a légpárna-szivattyúval történik erre a célra biztosított. A levegő mennyisége egyéni követelményeknek megfelelően. Ne fújja fel túl szorosan a párnát, és csak a mellékelt huzattal használja. Jelentkezéskor ügyeljen arra a burkolat sima és nem gyűrődik (nyomópontok veszélye). A párnát úgy kell elhelyezni, hogy a párnának ne legyen, része test érintkezhet a szeleppel, hogy elkerülje a nyomási pontokat vagy sérüléseket.

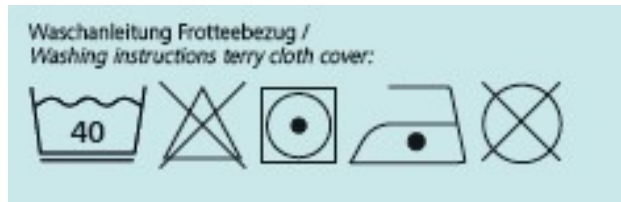
**Tisztítás és fertőtlenítés:** A frottír huzat legfeljebb mosógépben mosható 40 °C-on, és szükség esetén fertőtlenítő higiéniai öblítéssel kezeljük. Eldobható a burkolatok külön kaphatók és utána ki kell cserélni minden egyes alkalmazás. A légpárna nedves ruhával tisztítható, és szükség esetén enyhe háztartási tisztítószerrel. Ne használjon oldószer alapú vagy súrolószert tisztítószerek/tárgyak a sérülések elkerülése érdekében. Ne merítse víz alá a légpárnát vízben vagy más folyadékban. A törlőfertőtlenítést a kereskedelemben kapható, klórmentes fertőtlenítőszer, amely alkalmas gumi termékek. Fontos: Fertőtlenítőszer használatakor a gyártó s alkalmazási utasításokat be kell tartani.

**Biztonság:** Ne tegye ki a légpárnát közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak, tartsa hűvös és száraz. A légpárnák a hőmérsékleti tartományban használhatók 10-60 °C. Sérült, gúnyos vagy kopott termékek nem lehetnek használt (továbbra). A maximális terhelés 100 kg. Használja a légpárnát csak sértetlen, ép bőrrel, és ne használja betegeken. A párna élettartama állapotától függően körülbelül 2 év és a használat gyakorisága. Cserehuzatok kaphatók innen az Ön szakkereskedője.


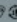


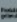
**Allergiások figyelmébe! Természetes gumi latex a párnában található allergiás reakciókat okozhat, kérjük, válasszon más gyógyászati segédeszközt a pozicionáláshoz!**

A törvényes garanciális igényeknek megfelelően. Kizárva a garanciából: nem rendeltetésszerű használatból eredő károk, ebből eredő hibák normál kopás, szándékosság, hanyagság vagy nem

megfelelő kezelés illetve olyan használat és hibák, amelyek csak a szerszám értékét vagy használhatóságát befolyásolják jelentéktelenül. A műszaki változtatások vagy a szakszerűtlen karbantartás érvénytelenek a garancia. Fenntartjuk a jogot olyan változtatásokra, amelyek a műszaki fejlesztés célja.



Sundo Homecare GmbH | Bahnhofstraße 13 | DE-30916 Isernhagen | [www.sundo-homecare.de](http://www.sundo-homecare.de)

CE      Produkt und Verpackung sind gemäß der Norm EN 12453 aus 100% recyceltem Papier hergestellt. 