

Nagy teherbírású szoba WC
0808524



RENDELTETÉS:

A Komód széket olyan mozgáskorlátozottak használhatják, akik nem tudnak a házban WC-re menni, illetve segédeszközként a vécécészen a tartály nélkül. Csak beltéri használatra tervezték.

Ne használja a terméket, ha súlyos egyensúlyi problémái vannak, és nem tud ülni.

VIGYÁZAT (!):

- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és forduljon a hivatalos és képzett képviselőhöz.
- Ha nem olvassa el ezt a használati útmutatót, jobb, ha nem használja ezt a terméket vagy más elérhető alkatrészt.
- Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben

- A MOBIK S.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért.
- A MOBIK S.A fenntartja a jogot a jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására
- Van egy $\pm 3\%$. Eltérés a termékek méretétől.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.
- Őrizze meg ezt a dokumentumot későbbi hivatkozás céljából.
- Legyen óvatos, ha gyerekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyerekek játszanak a termékkel.
 - Mindig különös elővigyázatosság szükséges, ha olyan mozgó alkatrészek vannak, amelyek a végtag becsípődését és sérülését okozhatják.
 - Ne próbálja megemelni a terméket semmilyen eltávolítható résznél fogva
 - Óvja a terméket a karcolásoktól, vágásoktól és szúrásoktól.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:

- A használati utasításban megadott maximális súlyt nem szabad túllépni.
- Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a terméket megfelelően és stabilan összeszerelte.
 - A termék csak akadályoktól mentes felületen használható.
 - Az összeszerelés során szigorúan tartsa be a Felhasználói kézikönyvben leírtakat.
 - Az ujsérülések veszélye megnövekedhet a szerelés vagy összeszerelés során.
 - Ne lendüljön a terméken, mert ez a lábak megcsúszásához, felborulásához vagy lesüllyedéséhez vezethet. Amikor használja a terméket, mindig tartsa az ülést a 4 lábán.
 - Semmilyen módon ne módosítsa a terméket és alkatrészeit.
 - Ne használja a terméket, ha sérült vagy bármilyen módon megváltozott. A repedések és deformációk erősen befolyásolhatják a termék teljesítményét és biztonságát.
 - Használat után a terméket le kell venni a zuhanytálcáról, hogy elkerülje az akadályokat.
 - Ne használja a terméket a rendeltetésétől eltérő célra.
 - A terméket nem szabad szabadban tárolni.
 - Ne helyezze vagy távolítsa el a komód serpenyőjét, amíg a beteg egy széken ül: nagy a sérülésveszély!

KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK:

A biztonságos használat és a megfelelő higiéniai színvonal garantálása érdekében a felhasználónak minden használat előtt végre kell hajtania ezeket az eljárásokat.

A felhasználónak meg kell bizonyosodnia a készülék és alkatrészeinek szerkezeti épségéről. A tisztítási és higiéniai eljárásokhoz kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kesztyűt kell viselni.
2. Mielőtt a legpontosabb fertőtlenítést végezné, távolítsa el a látható szennyeződések.
3. Használjon vizet vagy enyhe mosószert a tisztításhoz.
4. Törölje le száraz és tiszta ruhával.
5. Ha fertőtleníteni kell a terméket, használjon szokásos, enyhe fertőtlenítőszer
6. Használat után azonnal tisztítsa meg a WC-tartályt. Kezdetben öblítse le meleg vízzel. Ezután használjon enyhe tisztítószerrel vagy fertőtlenítőszerrel átitatott puha ruhát. Törölje le tiszta, puha ruhával.
7. FIGYELEM: Ne használjon savas és maró hatású higításokat

KÖRNYEZETVÉDELME:

Ha egy nap úgy találja, hogy a terméket ki kell cserélni, vagy már nem működik az Ön számára, fontolja meg a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi közszeméttel együtt (ezt jelenti a látható újrahasznosítási tábla is).

2) Lépjen kapcsolatba a hatóságokkal, és ők tájékoztatják Önt arról, hogy mely újrahasznosítási központokba kell leadni a terméket.







3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.

ESEMÉNY JELENTÉS:

Ha súlyos esemény történt ezzel a termékkel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a termék gyártójával a mobiakcarequality@mobiak.com címen.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Kizárólag mi vagyunk felelősek annak kinyilvánításáért, hogy az ebben a nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázati osztályba tartoznak (I. osztály), és megfelelnek a 745/2017/EK európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

					
59cm	46cm	70cm	49-66cm	9Kg	225Kg

HÁTÁMÁVAL, LEHAJTÓ KARÁMÁVAL ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ

Csomag tartalma:

A csomag belsejében található a termék fő kerete, a háttámla és a komód serpenyője, ahogy az alábbi képeken is látható




Összeszerelés:

A terméket összeszerelve és használatra készen szállítjuk. Előfordulhat, hogy össze kell szerelnie az ülést a háttámlával. A kezében lévő termék lehet

A háttámla ülésre történő felszereléséhez helyezze egyidejűleg a háttámla csöveit az ülés speciális nyílásaiba, amíg azok a helyükre nem rögzülnek.



A kartámasz lehajtásához nyomja meg a biztonsági kart, és nyomja lefelé a kartámaszt.

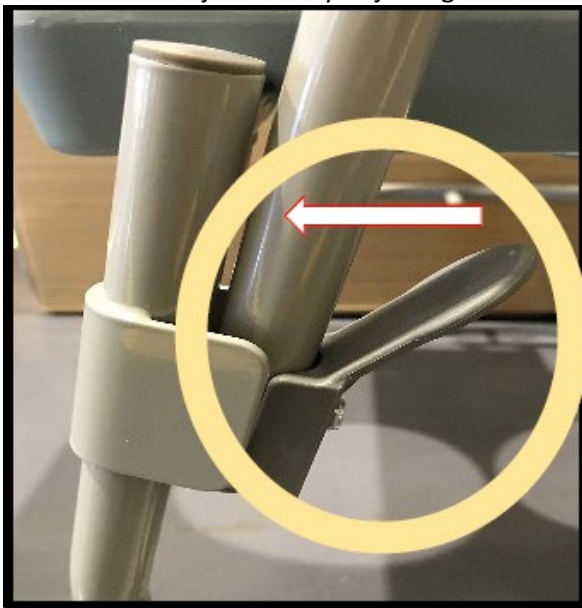

Előlről helyezze be a műanyag komódot a vezetőkbbe, és nyomja be teljesen az ülés alá.



GARANCIA:

A termékre a vásárlás dátumától számított egy (1) év garanciát vállalunk. A garancia a gyári hibákra vonatkozik, ÉS NEM TERMED a helytelen használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlhasználatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából eredő károkra.

NEM takarja el azokat az alkatrészeket, amelyek használat közben vagy idővel elhasználódhatnak. Természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák (adott esetben), fuvarozókra nem vonatkozik a garancia. Szervizt vagy pótalkatrészt nem alkalmaznak, kivéve, ha azt hivatalos szerviz vagy a termék gyártója ellenőrizte. A garanciális termékek szállítási költségeit a végfelhasználó-vevő vagy a kereskedő fizeti.